



Making Your Life Better Every Day
The true pouch cleanser that can improve your life.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1** Unpack OSTI-KLENZ™ and official bottle.
- 2** Screw OSTI-KLENZ™ to bottle filled with clean water (figure 1)
- 3** While sitting on a commode, hold pouch facing you and open drainable end by removing clamp or opening the velcro closing. Insert OSTI-KLENZ™ with open end face down into pouch 3 inches (just past the neck) (figure 2)
- 4** Hold pouch facing you and squeeze bottle until contents are emptied into pouch (figure 3)
- 5** Remove OSTI-KLENZ™ by turning it 180 degrees with end facing upward and remove completely from pouch
- 6** Fold up base of pouch 3 or 4 times or apply clamp to seal water and waste in the pouch. With both hands gently move waste and flush about in pouch.
- 7** With one hand on the upper part of pouch and the other on the lower opening, simultaneously press down quickly with the hand on the upper part of the pouch and the other hand on the lower opening. Release and flush will flow out of the bag with pressure and thus clean the pouch thoroughly. If necessary, repeat process immediately with second bottle.
- 8** When pouch is empty, use a dry tissue to blot end and fold pouch into original position. Then apply clamp or attach velcro.
- 9** Wash OSTI-KLENZ™ thoroughly. Refill bottle and screw on OSTI-KLENZ™. You are ready for the next cleansing.
- 10** Use detergent and water regularly to clean OSTI-KLENZ™.

Note: Tip of OSTI-KLENZ™ is always 6 inches from the Stoma.



figure 1



figure 2

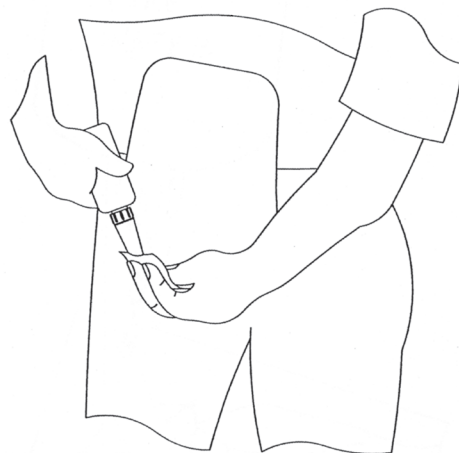


figure 3



Para hacer la vida mejor todos los días.
La bolsa verdadera que puede mejorar su vida.

LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO

- 1** Desempaque OSTI-KLENZ™ y la botella oficial.
- 2** Atornilla OSTI-KLENZ™ a la botella con el agua limpio. (figura 1)
- 3** Cuando está sentando en el inodoro, coge la bolsa hacia su mismo y abre el parte de desague por secar la abrazadera o por abrir la parte con el velcro. Inserte OSTI-KLENZ™ con el parte abierto hacia abierto en la bolsa 3 pulgadas (hasta el cuello). (figura 2)
- 4** Coge la bolsa hacia a su mismo y extrae hasta no hay contenidos están vaciados en la bolsa. (figura 3)
- 5** Quite OSTI-KLENZ™ por volverla 180 grados con la punta hacia arriba y quítala hacia arriba y quitarla completamente de la bolsa.
- 6** Doble para arriba el base de la bolsa 3 o 4 veces o appliqué la abrazadera al agua del sello y piérdala en la bolsa. Con las dos manos mueva suavemente la basura y limpiéla con un chorro de agua alrededor en la bolsa.
- 7** Con una mano en la parte superior de la bolsa y la otra en la abertura más baja, presione simultáneamente abajo rápidamente con la mano en la parte superior de la bolsa y en el lanzamiento y el rubor más bajos de la abertura fluirá del malo con la presión y limpiará así la bolsa a fondo. En caso de necesidad, repite el proceso de la repetición inmediatamente con la segunda botella.
- 8** Cuando la bolsa es vacía, utilice un tejido fino seco para borrar el extremo y para doblar la bolsa en la posición original. Después aplique la abrazadera o una el velcro.
- 9** Lava OSTI-KLENZ™ completamente. Rellena la botella y atornilla en OSTI-KLENZ™. Está listo para el limpiamiento siguiente.
- 10** Usa el detergente y el agua regularmente para limpiar OSTI-KLENZ™.

Nota: La punta de OSTI-KLENZ™ siempre está 6 pulgadas del estoma.



figura 1



figura 2

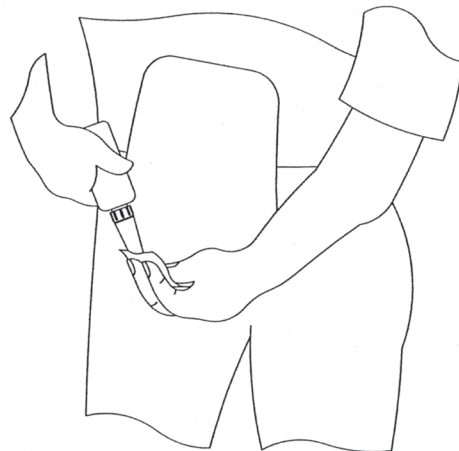


figura 3